


# Optima DIAB

Innovatief diabetisch gamma  
en efficiënt alternatief voor TCC




Artikelcode: DIAB/X

Maattabel alle modellen

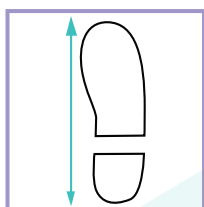

<b>S</b>	34-36
<b>M</b>	37-39
<b>L</b>	40-42
<b>XL</b>	43-45
<b>XXL</b>	46-48

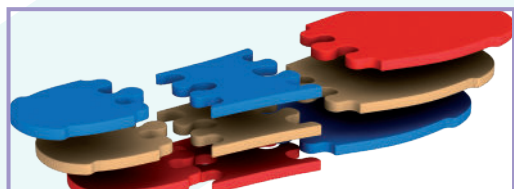

Behandeling van diabetische voetulcussen, post-op, post-trauma en fracturen

Hoge voet/enkel brace

## Kenmerken

- › **Individueel aanpasbare** schoen die een stijve zool en uitneembare voering bevat voor drukherverdeling tijdens het stappen.
- › In de zool is een **versteving** verwerkt die rotatie en flexie van de voet vermijdt zodat er minder belasting is tijdens het wandelen.
- › **Zool** bestaat uit 3 individuele lagen met 3 soorten densiteit
- › De contrefort bevat een volledig thermisch vervormbare versteving.
- › Te sluiten met 4 velcro straps
- › **Hygiëne:** was- en ontsmetbaar, ademend en röntgen-doorlatend

Dit model omvat:

N° 1 puzzel binnenzool kit 3x3 voor een gerichte decompressie van het ulcus

N° 1 niet verwijderbare System (voor eenmalig gebruik - plastic vergrendelband)

## Indicaties

- › Diabetische voetulcus
- › Revalidatie na een amputatie (met uitzondering van Chopart-amputatie)
- › Revalidatie na operatieve interventie op tarsus
- › Tarsale breuk
- › Behandeling van Charcot-voet in de chronische fase
- › Chirurgische ingrepen bij achillespees
- › Enkelfractuur
- › Revaliderende behandeling van hemiplegie

# Optima DIAB (2)

Innovatief diabetisch gamma  
en efficiënt alternatief voor TCC



## Optima CLHEEL - Art. CLHEEL/X



## Kenmerken

- › In de zool is een **versteving** verwerkt die rotatie en flexie van de voet vermijdt zodat er minder belasting is tijdens het wandelen.
- › **Zool** bestaat uit 3 individuele lagen met 3 soorten densiteit
- › Te sluiten met 4 velcro straps
- › **Hygiëne**: was- en ontsmetbaar, ademend en röntgen-doorlatend Dit model omvat:

### Dit model omvat:

N. 1 clheel plantaire Kit voor gelokaliseerde decompressie van de wondevergrendelband)

## Optima POST OP - Art. POSTOP/X



## Kenmerken

- › In de zool is een versteving verwerkt die rotatie en flexie van de voet vermijdt zodat er minder belasting is tijdens het wandelen.
- › Zool bestaat uit 3 individuele lagen met 3 soorten densiteit
- › De contrefort bevat een volledig thermisch vervormbare versteving.
- › **Individueel aanpasbare** schoen die een stijve zool en uitneembare voering bevat voor drukherverdeling tijdens het stappen.
- › Te sluiten met 3 velcro straps
- › **Hygiëne**: was- en ontsmetbaar, ademend en röntgen-doorlatend

### Dit model omvat:

N ° 1 uit een stuk soft plantaire binnenzool

Optie : 3x3 puzzle kit voor optimale drukverdeling

## Indicaties

- › Diabetische voetulcus met veneuze problemen in het been, behandeling van de lateraal zijde van de voet of behandeling van een voet met risico op een ulcus, matatarsaal fracturen, revalidatie na teenamputaties, stabilisatie voor chirurgische ingreep, teenfracturen.