


Conformer Diabetic boot

L'orthèse de marche pour diabétiques



Indications

- › Alternative à un plâtre à contact total ("total contact cast") pour le traitement des ulcères ou des troubles précédant les ulcères au niveau de la plante du pied, 30% plus de réduction de la pression
- › Fasciite plantaire ou autres problèmes de pied qui nécessite une meilleure répartition du poids du corps
- › Dystrophie du pied et de la jambe
- › Fractures de fatigue

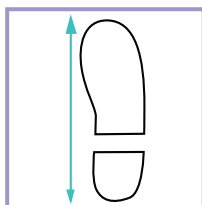

Caractéristiques

- › Effet unique de réduction de la pression grâce à la semelle en polyuréthane en forme de cocon associée à une mousse visco-élastique à mémoire de forme
- › Distribution de la pression au niveau de la plante du pied et soutien au centre et sur les cotés
- › Meilleure répartition de la pression qu'avec un plâtre à contact total (voir étude présentée à l'AAOS*)
- › Produit semi-personnalisé étant donné que la semelle en polyuréthane doit être adaptée à la forme du pied
- › Profil bas afin de prévenir les douleurs à la hanche
- › Munie de série d'une "air bladder" pour une fixation supplémentaire des malléoles
- › "Rocker-bottom" avec 4 phases qui permettent d'approcher la démarche naturelle : heelstrike, straight, roll-off et toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour un positionnement parfait de la jambe
- › En aluminium de qualité supérieure pour une immobilisation idéale
- › La mousse perméable à l'air autour de la jambe prévient la transpiration: une exclusivité de Bledsoe
- › Largeur optimale de la semelle de marche :
 - le patient peut marcher de façon stable
 - le genou ne se palce pas en valgus de sorte que le patient n'éprouve pas de douleur au niveau des condyles

* Etude disponible en version pdf

Taille	Pointure	Code d'art. (gauche)	Code d'art. (droite)
4-5	35 - 37,5	AL041104	AL041204
6-7	38 - 39,5	AL041106	AL041206
8-9	40 - 42	AL041108	AL041208
10-11	42 - 44,5	AL041110	AL041210
12-13	45 - 47	AL041112	AL041212
14-15	47->49	AL041114	AL041214