
HUMELOCK™ REVERSED "SPACER"



FX SOLUTIONS


DESCRIPTION DU SYSTEME

Une fois la coupe humérale réalisée :

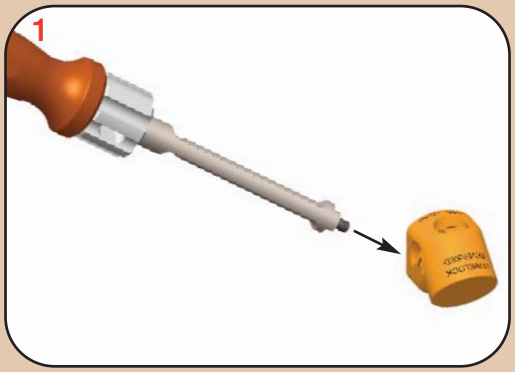

Montage du spacer Humelock Reversed :

Visser le guide support dans l'un des trois taraudages du spacer en fonction de la voie d'abord :
-deltopectoral droite ou gauche
-supero externe.

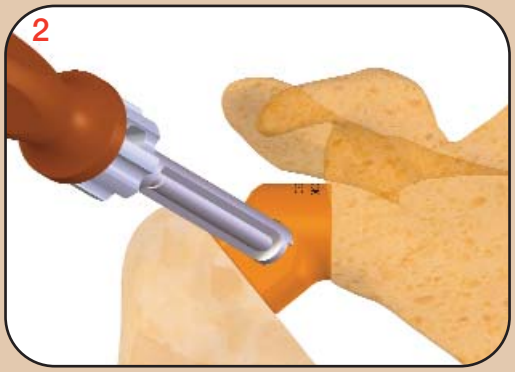


Mise en place du spacer Humelock Reversed :

Placer le spacer entre la coupe humérale et la glène en plaquant la face glénoïdiennne du spacer au niveau de l'emplacement de la métaglène.

Si le spacer passe, la coupe humérale est suffisante pour permettre d'implanter une glénosphère Ø36 mm et une cupule +3 mm (ou +6 / +9 mm).

Sinon, une nouvelle coupe humérale doit être effectuée permettant l'insertion du spacer.

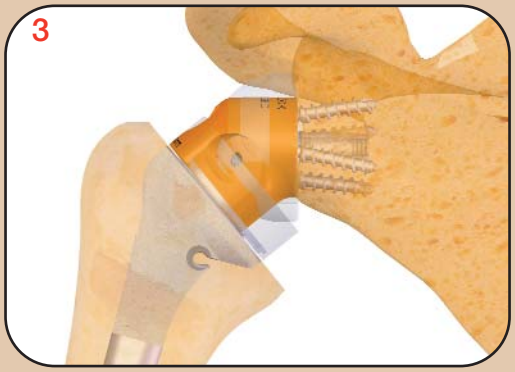

L'encombrement du spacer correspond à celui d'une cupule humérale standard +3 mm avec une glénosphère Ø36 mm centrée.

1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France
Tél. : (33) Ø4 74 55 35 55 - Fax : (33) Ø4 74 52 44 01
E-mail: info@fxsolutions.fr - www.fxsolutions.fr

Copyright © 2017, FX Solutions,

TP34-FR-18/05/17